



10-in-1 Hydrafacial-Gerät

BENUTZERHANDBUCH

Einführung

Zunächst möchten wir uns herzlich bei allen Kunden bedanken, die unsere Instrumente erworben haben. Dieses Handbuch richtet sich an unsere Kundendienstmitarbeiter und soll ihnen die optimale Nutzung des Instruments erleichtern. Wir hoffen, dass die Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens Ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen.

Beachten

- Dieses Produkt darf nur gemäß der Gebrauchsanweisung in diesem Handbuch verwendet werden. Jegliche Folgen, die durch unsachgemäße Verwendung oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, trägt der Benutzer. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung.
- Das Unternehmen übernimmt keinerlei Gewährleistung, insbesondere nicht die Gewährleistung der Handelsüblichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Das Unternehmen haftet nicht für Fehler in diesen Informationen oder für mittelbare oder Folgeschäden, die durch die tatsächliche Nutzung dieses Handbuchs entstehen.
- Dieses Handbuch enthält geschützte Informationen, die durch Patentrechte geschützt sind und dem Urheberrecht unterliegen. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieses Handbuchs fotografiert, kopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.
Unternehmen.
- Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Benachrichtigung des Benutzers geändert werden.

Verantwortung des Herstellers

Unser Unternehmen übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Geräts nur unter folgenden Bedingungen: Montage, Justierung, Verbesserungen und Reparaturen, die ausschließlich von firmeneigenem Personal durchgeführt werden. Die verwendeten elektrischen Geräte entsprechen den nationalen Normen, und das Gerät wird gemäß der Bedienungsanleitung verwendet.



Warnung:

Dies ist ein Schönheitsgerät.

Kann die für die Nutzung dieses Geräts verantwortliche Einrichtung keinen zufriedenstellenden Betriebsplan umsetzen, kann es zu Geräteausfällen kommen und die Gesundheit der Nutzer gefährden. Unser Unternehmen stellt auf Anfrage Schaltpläne gegen Gebühr zur Verfügung und bietet zudem Informationen zu Kalibrierungsmethoden und weitere Hinweise, um Nutzern die Reparatur von Geräteteilen zu ermöglichen, die nach unserem Unternehmen von qualifizierten Technikern selbst repariert werden können.

Garantie

Herstellungsprozess und Rohstoffe: Das Unternehmen garantiert, dass das Instrument (ausgenommen Zubehör) bei sachgemäßer Verwendung und Wartung innerhalb eines Jahres ab Versanddatum keine Herstellungs- oder Materialfehler aufweist. Eine vollständige Fehlerfreiheit kann jedoch auch durch das Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle allgemeinen Informationen zu diesem Gerät. Es dient als Einstieg für neue Benutzer, da es eine allgemeine Einführung in das System bietet, dessen Funktionsweise erklärt und die Installation sowie verschiedene Bedienungsverfahren beschreibt. Die benötigten Informationen finden Sie im Verzeichnis.

Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die mit dem Fachwissen im Bereich Schönheitstechnik im Zusammenhang mit diesem Instrument vertraut sind und Erfahrung im Umgang mit Schönheitsgeräten haben.

Bitte verwenden Sie es sicher.

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung verwendet. Um das Gerät korrekt zu verwenden, Verletzungen von Anwendern und Patienten zu vermeiden, das Gerät vor Beschädigungen zu schützen und Sachschäden zu verhindern, beachten Sie bitte die Art und Bedeutung der folgenden Symbole.

	Warnung:	Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Fehlbildung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.		Das Symbol kennzeichnet Pflichtartikel.
	Gefahr:	Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Fehlbildung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.		Das Symbol kennzeichnet verbotene Gegenstände.
	Beachten:	Dieses Symbol weist darauf hin, dass es bei unsachgemäßer Bedienung zu Personenschäden und Geräteausfällen kommen kann.		Das Symbol kennzeichnet die zu beachtenden Punkte.
	Beachten:	Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.		Dieses Zeichen kennzeichnet, dass es sich bei dem Gerät um den Schutztyp B handelt.
Markieren:		Dieses Symbol dient als Erinnerung und hebt wichtige Informationen hervor.		

CONTENTS

Chapter 1 Precautions.....	05
Chapter 2 Contraindications.....	09
Chapter 3 Introduction to the instrument.....	10
Chapter 4 Instrument Installation Instructions.....	13
Chapter 5 Handle operation methods and steps.....	15
Chapter 6 Treatment precautions.....	25
Chapter 7 Maintenance and Repair.....	26
Chapter 8 Common faults and elimination methods.....	28
Chapter 9 Responsibilities of the manufacturer.....	29
Chapter 10 Replacement of accessories.....	30
Chapter 11 Storage and transportation.....	31



1.1 Vorsichtsmaßnahmen für den Einsatzort



Warnung:

- 1) Bitte verwenden Sie keine Parallelsteckdosen, um Ihre zu vermeiden;
- 2) Beim Auswechseln der Sicherung muss unbedingt der Netzschalter ausgeschaltet werden, um Brände und Stromschläge zu vermeiden;
- 3) Es muss eine Stromversorgung von $220\text{ V} \pm 22\text{ V}$, $50\text{ Hz} \pm 1\text{ Hz}$ und eine wirksam geerdete Steckdose verwendet werden;
- 4) Bei der Verwendung eines beschädigten oder manipulierten Netzkabels besteht Brand- und Stromschlaggefahr;
- 5) Das Netzkabel darf nicht übermäßig geknickt oder verdreht werden, um Brände und Stromschläge zu vermeiden.
- 6) Falls das Instrument locker ist, heruntergefallen oder beschädigt wurde, kontaktieren Sie bitte umgehend das Unternehmen;
- 7) Dieses Instrument darf nicht in instabilen Umgebungen wie Neigung, Vibration, Stößen usw. verwendet werden.
- 8) Es dürfen weder Wasser noch Fremdkörper in das Innere des Instruments eindringen. Sollten dennoch Fremdkörper eindringen, kontaktieren Sie bitte umgehend unser Unternehmen;
- 9) Vor dem Bewegen des Instruments muss der Netzstecker gezogen werden;
- 10) Beim Transport des Instruments sollten Vibrationen möglichst vermieden werden;
- 11) Das Instrument sollte an einem stabilen Ort mit mindestens 5 cm Abstand zu anderen Teilen aufgestellt werden, um eine Luftzirkulation und Wärmeableitung zu gewährleisten.
- 12) Das Instrument darf nicht abgedeckt werden, damit die Belüftungsöffnung nicht blockiert wird.

Vermeiden Sie die Verwendung dieses Instruments in folgenden Umgebungen: Orte, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind; Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit; Umgebungen in der Nähe von Gewässern; Orte 13) mit Vibrationen und Neigungen; Umgebungen mit starken Magnetfeldern; Orte, an denen elektromagnetische Wellen und Impulsspannungen auftreten; Orte, an denen Chemikalien werden gelagert; Orte mit ätzenden Gasen;
- 14) Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Radios, Fernsehgeräten, Kopierern, Faxgeräten usw. verwendet werden;
- 15) Es kann nicht zusammen mit anderen Geräten (wie z. B. Mikrowellen) verwendet werden, um gegenseitige Störungen der Geräte und Fehlfunktionen zu vermeiden.



Kapitel 1 Vorsichtsmaßnahmen

1.2 Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung



Warnung:

- 1) Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine einschalten. Der Bediener muss mit der Bedienungsanleitung vertraut sein und Die Bedienungsmethode und das Gerät müssen von einer dafür vorgesehenen Person bedient werden; 2)
Die Festlegung der Betriebsparameter erfolgt unter Anleitung von Fachleuten;



Beachten:

- 3) Vor Gebrauch prüfen, ob das Instrument normal funktioniert;
- 4) Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel korrekt angeschlossen ist;
- 5) Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt angeschlossen und sicher sind; 6)
Wenn die Instrumente zusammen verwendet werden, müssen sie korrekt eingesetzt werden, da sonst Gefahren entstehen können, und es muss große Vorsicht walten gelassen werden.



Kapitel 1 Vorsichtsmaßnahmen

1.3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung



Warnung:

- 1) Wenn während der Operation eine Störung zwischen dem Instrument oder dem Patienten auftritt, muss der Bediener unverzüglich den Bedienhebel vom Patienten entfernen, den Stoppschalter betätigen und die Benutzung des Instruments einstellen.



Beachten:

- 2) Während des Betriebs des Instruments ist es notwendig, den Zustand der Gäste und des Instruments ständig zu beobachten und auf Folgendes zu achten:
ob zu irgendeinem Zeitpunkt eine anormale Situation vorliegt; 3)
Dieses Gerät darf nur von erfahrenen Bedienern sachgemäß bedient werden. Anderen Personen ist die Benutzung nicht gestattet.
dieses Instrument.

1.4 Vorsichtsmaßnahmen nach Gebrauch



Beachten:

- 1) Nach dem Betrieb wird der Bedienhebel wieder in die Bedienhebelhalterung eingesetzt.
Nach Gebrauch des Bediengriffs sollte die Sonde für den nächsten Einsatz gereinigt werden.
- 2)



1.5 Mängel, Verwahrung, Vorsichtsmaßnahmen bei der Inspektion



Warnung:

- 1) Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ungewöhnliche Bedingungen auftreten. Wenn es nach Rauch oder Verbranntem riecht und nicht bedient werden kann.
Bei weiterer Benutzung besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Bitte drücken Sie schnell den Stoppknopf, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und
Bitte kontaktieren Sie umgehend unser Unternehmen oder Ihren Händler;
- 2) Andere Personen als Techniker dürfen das Instrument weder reparieren noch verändern. Das Innere des Instruments darf niemals geöffnet werden;



Beachten:

- 3) Instrumente und Bauteile müssen regelmäßig überprüft werden;
Verwenden Sie keine Reinigungswerkzeuge, die die Schutzbeschichtung des Instruments beschädigen könnten, wie z. B. Bürsten, Besen usw.; 4)
Wenn das Instrument länger als zwei Wochen nicht benutzt wurde, muss es vor der Wiederverwendung sorgfältig geprüft werden. 5)

1.6 Warnhinweise und Anweisungen



Warnung:

Werden Hochfrequenzgeräte und dieses Instrument gleichzeitig an denselben Patienten angeschlossen, kann es an der Elektrodenposition des Instruments zu Verbrennungen des Hautgewebes und zu Beschädigungen des Instruments kommen. Bei Verwendung des Instruments in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellengeräten (1 m) kann die Ausgangsleistung aufgrund von Mikrowellenstörungen instabil sein.

Die Verwendung von Elektroden in der Nähe des Brustkorbs erhöht das Risiko von Herzrasen.



-  1. Menschen mit empfindlicher Haut und schwerer Akne
-  2. Herzschrittmacher, implantierbarer Kardioverter-Defibrillator oder anderes elektromagnetisches implantierbares medizinisches Gerät
-  3. Patienten mit schwerem Diabetes, Bluthochdruck und Hyperlipidämie
-  4. Menschen mit Hautinfektionskrankheiten



Kapitel 3 Einführung in das Instrument



Flasche A, B, C, D

Flasche A-clean

Flasche B - Aufhellend und feuchtigkeitsspendend

Flaschen-C-Tiefenreinigung

Flaschen-D-Rohrreinigung






Kapitel 3 Einführung in das Instrument



Kartensensor



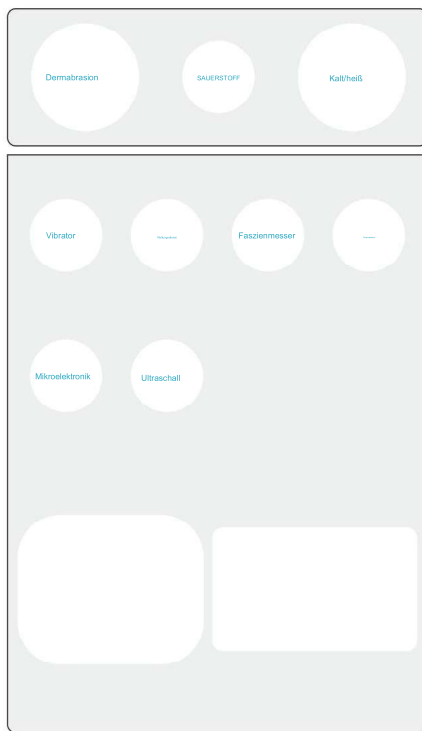

Beschreibung der Ausgabelochplatte

Dermabrasion



Sauerstoff



Kalt/heiß



Vibrator



Mikroelektronik



Faszienmesser



Ultraschall



Mikroelektronik



Ultraschall





Kapitel 4: Installationsanleitung für Instrumente

4.1 Auspacken und prüfen

- 1) Nehmen Sie das Instrument und das Zubehör vorsichtig aus dem Verpackungskarton und bewahren Sie das Verpackungsmaterial für späteren Transport oder Lagerung auf.
das Zubehör gemäß Packliste.
- 2) Prüfen Sie auf mechanische Beschädigungen.



Beachten:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Vertriebsabteilung oder unsere Agenten.

4.2 Das Instrument sollte in einem sauberen, gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80 % aufgestellt werden, fern von:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind und dass um das Instrument herum mindestens 5 cm Freiraum vorhanden sind.

Es dürfen keine Gegenstände auf dem Instrument platziert werden, auch keine vorübergehenden.

4.3 Setzen Sie die Zubehörteile gemäß den Text- und Bildhinweisen über den Ausgangsschnittstellen auf beiden Seiten des Geräts ein.

entsprechende Schnittstellen herstellen. Anschließend das Zubehör ordentlich auf dem Zubehörständer platzieren.



Kapitel 4: Installationsanleitung für Instrumente

4.4 Installationsanleitung für die Flaschen A, B, C, D




Beachten:

Beim Herausnehmen der Flasche diese nach unten ziehen, beim Wiedereinsetzen der Flasche bitte nach oben drücken.



Beachten:

Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Versorgungsspannung korrekt ist.

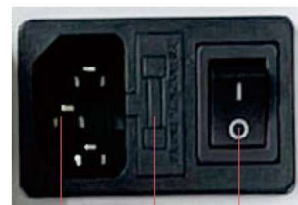

Steckdose

Sicherungsschalter



Beachten:

Bitte leeren Sie vor dem Transport des Instruments die Flüssigkeiten in den Flaschen A, B, C, D und der Abfallflasche. Andernfalls kann die Flüssigkeit während des Transports in das Instrument eindringen und es beschädigen!




Beachten:

Während des Gebrauchs piept das Gerät, und das Symbol für die Abfallflüssigkeitsflasche auf der Benutzeroberfläche erlischt. Sollte es erlischt, leeren Sie bitte die Abfallflüssigkeit aus der Abfallflüssigkeitsflasche und setzen Sie die Flasche wieder ein.



5.1 Anwendung des Aqual-Peelings

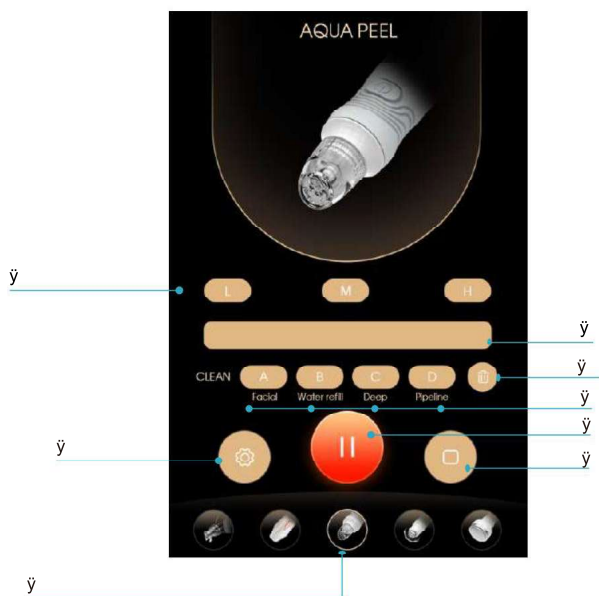

• Geben Sie die Intensität des Vakuums an. Es gibt drei Stufen: L, M, H.

L bedeutet niedriges Niveau; M bedeutet mittleres Niveau; H bedeutet hohes Niveau.

Wir können die Intensität je nach Toleranz des Kunden wählen.

• Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Griff betätigen, startet er Countdown.

• Zeigt den Zustand der Abfallflasche an.

Wenn die Abwasserflasche voll ist, färbt sie sich rot. Normalerweise passen wir das an.

Kunden sollen es jeden Tag reinigen.

• Kennzeichnet Flaschen A, B, C, D (500 ml/Flasche) für 4 verschiedene Lösungen.

Das Essenz-Set enthält 7 Fläschchen.

Die beiden blauen Flaschen enthalten ein Tiefenreinigungsmittel und gehören zu Flasche A.

Die beiden gelben Flaschen enthalten ein Gesichtswasser und gehören zu Flasche B.

Bei den 2 violetten Flaschen handelt es sich um Hautessenz, die für Flasche C bestimmt ist. Bei

der 1 grünen Flasche, die für Flasche D bestimmt ist, handelt es sich um eine Pfeifenreinigungslösung.

Es handelt sich um eine 20-ml-Flasche. Diese muss mit gereinigtem Wasser verdünnt werden: 10 ml auf 500 ml gereinigtes Wasser. Die restliche Lösung muss gut verpackt und im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Normalerweise empfehlen wir, die verdünnte Lösung innerhalb von 7 Tagen aufzubrauchen.

• Dies ist die Schaltfläche für die Einstellungen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche kann die Sprache geändert werden.

• Start-/Stopp-Taste

• Reset-Taste

• Andere Griffe auswählen



5.1 Anwendung des Aqual-Peelings

- 5.1.1 Abschminken und reinigen.
- 5.1.2 Wählen Sie den für Ihren Hauttyp geeigneten Dermabrasionskopf und anschließend die gewünschte Flüssigkeitsflasche A, B, C oder D auf dem Bildschirm aus.
- 5.1.3 Stellen Sie die Intensität und den Wasserdruckknopf ein, um das gesamte Gesicht zu reinigen (10 Minuten).

Wasserdruckeinstellung



Wasserdruckeinstellung



Beachten:

- 5.1.5 Nach der Reinigung des gesamten Gesichts die D-Taste an der Flasche drücken, um das Dermabrasionsrohr zu reinigen, den Dermabrasionskopf mit der Plastikkappe abdecken und Das Gerät reinigt das Rohr automatisch.
Wenn die Lösung aufgebraucht ist, reinigen Sie bitte die Flaschen A, B, C und D mit warmem Wasser und anschließend erneut gemäß der Anleitung zur Reinigung von Dermabrasionsrohren. Rohrverstopfungen verhindern.

5.1.4 Verwendung des Griffs




Stempel



Aufzug



5.2 Verwendung von Sauerstoff

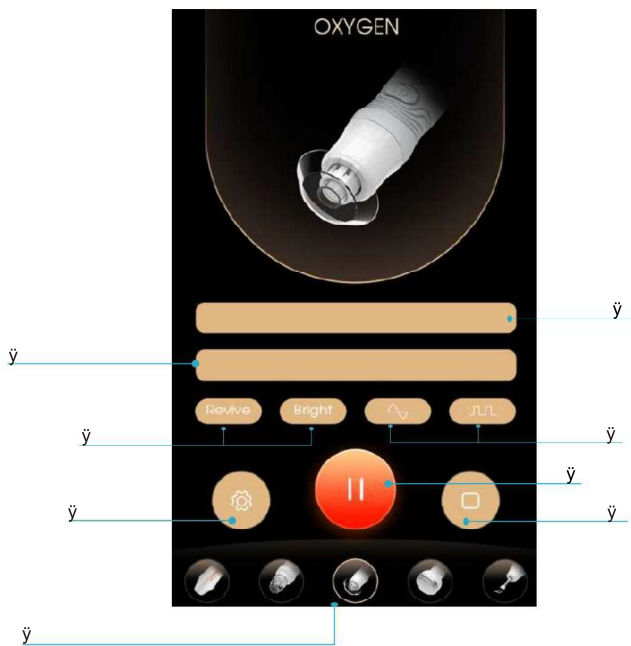

• Geben Sie die Intensität der Vibration an.

Wir können die Intensität je nach Toleranz des Kunden wählen.

• Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Hebel betätigen, startet der Countdown.

• Wählen Sie das gewünschte Produkt aus; diese Produkte müssen separat erworben werden. Es gibt die Produkte Revive und Bright.

• Geben Sie den Arbeitsmodus an.



bedeutet kontinuierlicher Arbeitsmodus

bedeutet Impulsbetriebsmodus

• Dies ist die Schaltfläche für die Einstellungen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche kann die Sprache geändert werden.

• Start-/Stopp-Taste

• Reset-Taste

• Andere Griffe auswählen




5.2 Verwendung von Sauerstoff

5.2.1 Reinigen Sie die zu bedienenden Teile;

5.2.2 Gieße die Essenz in den Behälter und trage sie anschließend gleichmäßig auf das Gesicht auf.

Griff 5. Richten Sie den Vibrator auf den Arbeitsbereich aus und drücken Sie den Schalter am 2. 3, um den Betrieb zu starten;


5.2.4 So verwenden Sie den Griff:

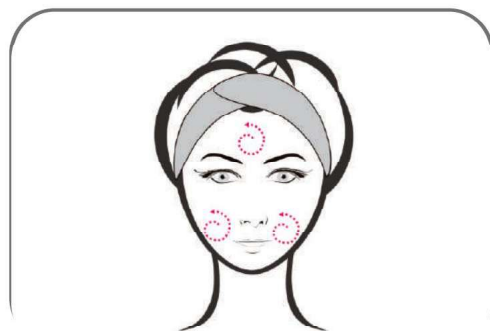

Kreisbewegung auf der Fläche



5.3 Verwendung von Kalt/Warm

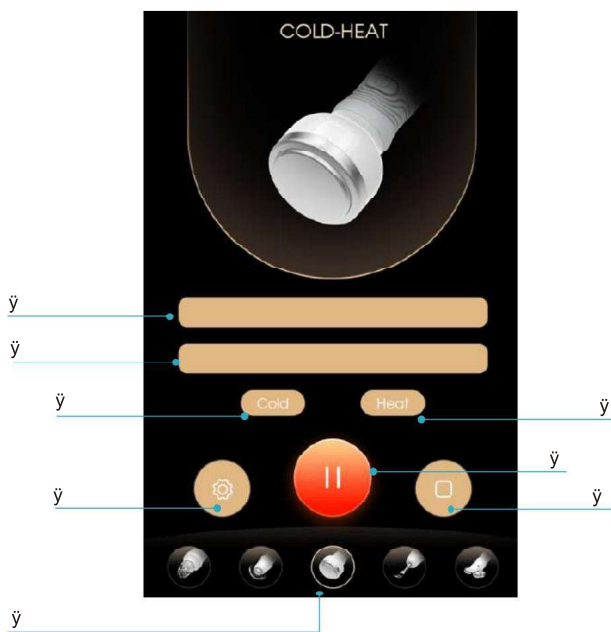

ÿ Temperatureinstellung angeben

Im Kaltmodus ist die Temperatur von 0 bis 5 °C einstellbar.

Normalerweise empfehlen wir 2 °C.

Im Heizmodus ist die Temperatur von 28 bis 45 °C einstellbar.

Normalerweise empfehlen wir 40 °C.

ÿ Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Hebel betätigen, startet der Countdown.

ÿ Zeigt den Kühl- und Heizbetriebsmodus an. ÿ Ist die Einstellungstaste. Durch Klicken kann die Sprache geändert werden.

ÿ Start-/Stopp-Taste

ÿ Reset-Taste

ÿ Andere Griffe auswählen



5.3 Verwendung von Kalt/Warm

- 5.3.1 Reinigen Sie die zu bedienenden Teile;
- 5.3.2 Drücken Sie den Startknopf;
- 5.3.3 Die Bedienung sollte so erfolgen, dass der Griffkopf die Haut berührt;


5.3.4 So verwenden Sie den Griff:



Kreisbewegung auf der Fläche



5.4 Verwendung der Reinigungsschaufel

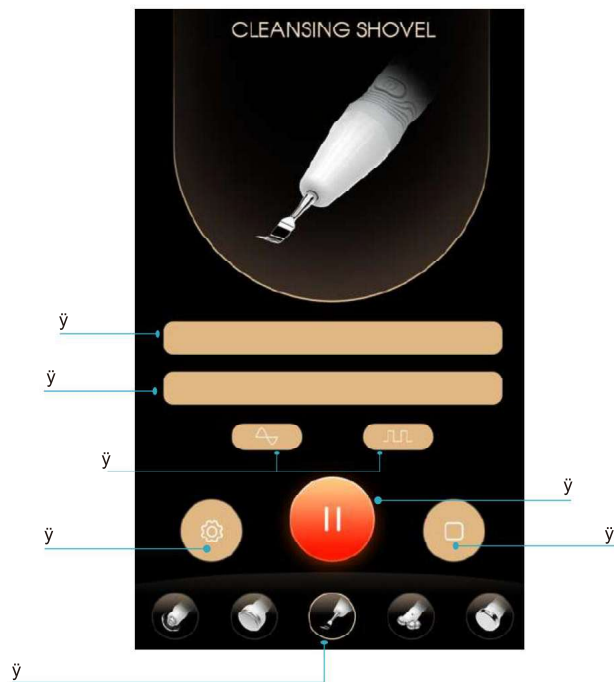

ÿ Geben Sie die Intensität der Vibration an.

Wir können die Intensität je nach Toleranz des Kunden wählen.

ÿ Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Hebel betätigen, startet der Countdown.

ÿ Geben Sie den Arbeitsmodus an.



bedeutet kontinuierlicher Arbeitsmodus

bedeutet Impulsbetriebsmodus

ÿ Start-/Stopp-Taste

ÿ Dies ist die Schaltfläche für die Einstellungen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche kann die Sprache geändert werden.

ÿ Reset-Taste

ÿ Andere Griffe auswählen



5.4 Verwendung der Reinigungsschaufel

5.4.1 Reinigen Sie die zu bedienenden Teile; 5.4.2

Tragen Sie eine angemessene Menge Nährgel auf den betroffenen Teil auf;

5.4.3 Arbeitszeit, Arbeitsintensität und Modus einstellen; Die Sonde

5.4.4 in die Nähe des aktiven Teils bringen, die Starttaste auf dem Bildschirm anklicken oder die Starttaste am Griff drücken;

5.4.5 Führen Sie kreisende Bewegungen entlang der Gesichtskonturen aus.

Kunden müssen beim Anheben des Halses mitwirken, um die Entgiftung in kreisenden Bewegungen von unten nach oben zu unterstützen. Die Behandlungszeit für jeden Bereich beträgt 10-15 Minuten.


5.4.6 So verwenden Sie den Griff:



Aufzug



5.5 Nutzung von HF

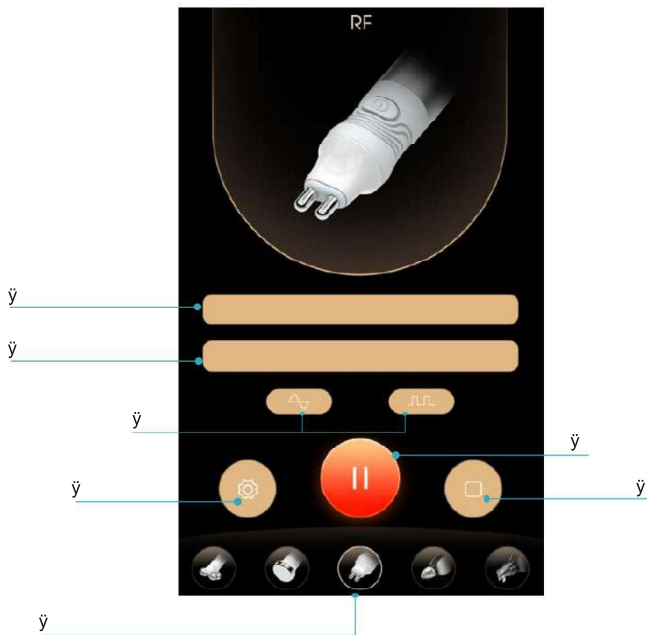

ÿ Geben Sie die HF-Energie an.

Wir können die Energieart entsprechend der Toleranz des Kunden auswählen.

ÿ Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Hebel betätigen, startet der Countdown.

ÿ Geben Sie den Arbeitsmodus an.



bedeutet kontinuierlicher Arbeitsmodus

bedeutet Impulsbetriebsmodus

ÿ Dies ist die Schaltfläche für die Einstellungen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche kann die Sprache geändert werden.

ÿ Start-/Stopp-Taste

ÿ Reset-Taste

ÿ Andere Griffe auswählen



5.5 Nutzung von HF

5.5.1 Reinigen Sie die zu bedienenden Teile;

5.5.2 Tragen Sie eine angemessene Menge RF-Gel oder ätherisches Öl auf die betroffene Stelle;

Arbeitszeit, Arbeitsintensität und Modus anpassen 5.5.3
Parameter;

5.5.4 Platzieren Sie die Sonde in der Nähe des aktiven Teils, klicken Sie auf das Symbol auf dem Bildschirm und drücken Sie dann die Starttaste am Griff, um die Funktion zu starten;

5.5.5 Folgen Sie langsam den Konturen der betroffenen Stelle und heben Sie das Gerät 5 bis 8 Minuten lang in kreisenden Bewegungen an;


5.5.6 So verwenden Sie den Griff;



Aufzug



5.6 Verwendung von Mikrolift

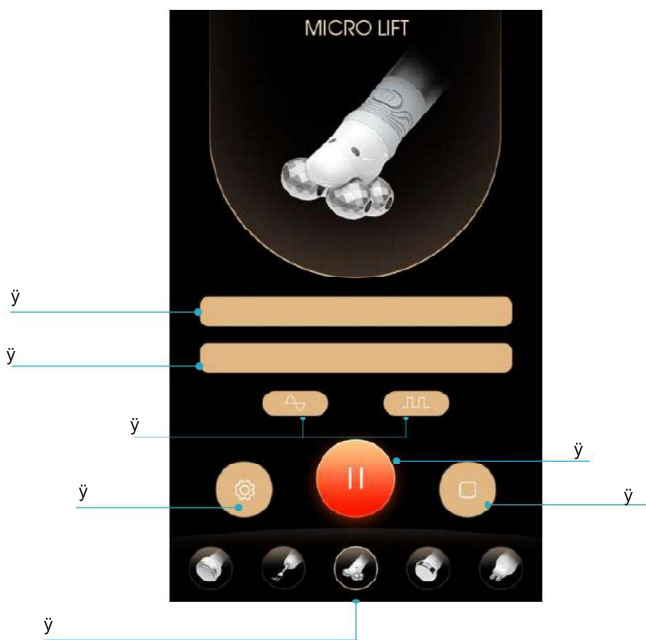

• Geben Sie die Energieintensität an.

Wir können die Energieart entsprechend der Toleranz des Kunden auswählen.

• Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Hebel betätigen, startet der Countdown.

• Geben Sie den Arbeitsmodus an.



bedeutet kontinuierlicher Arbeitsmodus

bedeutet Impulsbetriebsmodus

• Dies ist die Schaltfläche für die Einstellungen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche kann die Sprache geändert werden.

• Start-/Stopp-Taste

• Reset-Taste

• Andere Griffe auswählen



5.6 Verwendung von Mikrolift

- 5.6.1 Reinigen Sie die zu bedienenden Teile;
- 5.6.2 Tragen Sie eine angemessene Menge Essenz auf die betroffene Stelle auf; Stellen
- 5.6.3 Sie die Parameter Arbeitszeit, Arbeitsintensität und Modus ein; Halten Sie die
- 5.6.4 Sonde nahe an den aktiven Bereich, klicken Sie auf das Symbol auf dem Bildschirm und drücken Sie anschließend die Starttaste am Griff, um die Funktion zu starten;

an. 5.6.5 Folgen Sie langsam den Konturen des betroffenen Bereichs und heben Sie ihn in kreisenden Bewegungen für 5 bis 8 Minuten;


5.6.6 So verwenden Sie den Griff;



Aufzug



5.7 Anwendung des Ultraschalls

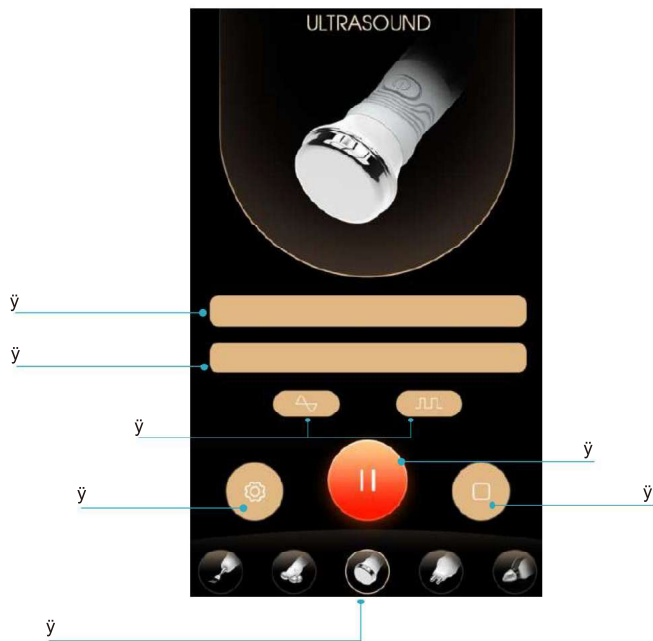

• Geben Sie die Energieintensität an.

Wir können die Energieart entsprechend der Toleranz des Kunden auswählen.

• Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Hebel betätigen, startet der Countdown.

• Geben Sie den Arbeitsmodus an.



bedeutet kontinuierlicher Arbeitsmodus

bedeutet Impulsbetriebsmodus

• Dies ist die Schaltfläche für die Einstellungen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche kann die Sprache geändert werden.

• Start-/Stopp-Taste

• Reset-Taste

• Andere Griffe auswählen



5.7 Anwendung des Ultraschalls

- 5.7.1 Reinigen Sie die zu bedienenden Teile;
- 5.7.2 Tragen Sie eine angemessene Menge des Essenzes auf die betroffene Stelle auf;
- 5.7.3 Arbeitszeit, Schallwellenintensität und Modusparameter anpassen;
- 5.7.4 Platzieren Sie die Sonde in der Nähe des aktiven Teils, klicken Sie auf das Symbol auf dem Bildschirm und drücken Sie dann die Starttaste am Griff, um die Funktion zu starten;
- 5.7.5 Folgen Sie langsam den Konturen der betroffenen Stelle und heben Sie das Gerät 5 bis 8 Minuten lang in kreisenden Bewegungen an;


5.7.6 So verwenden Sie den Griff;



Aufzug



5.8 Verwendung des Sauerstoffstrahls

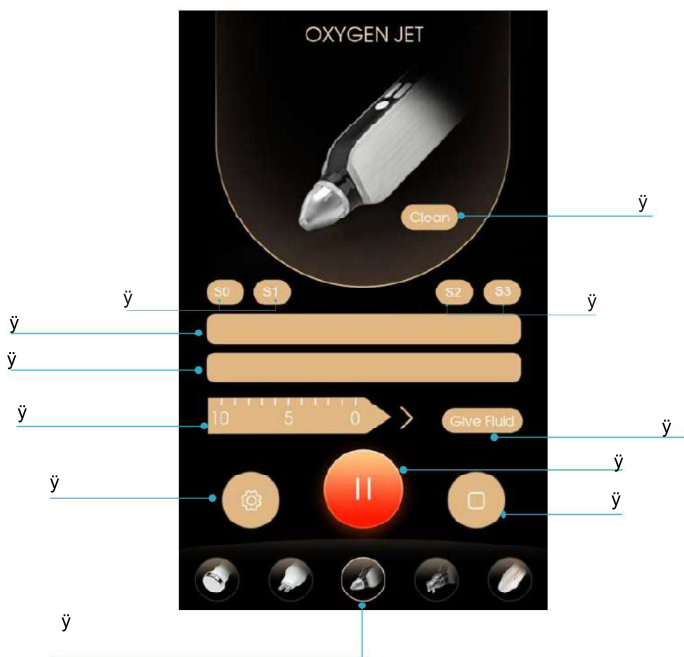

1 Schaltfläche „Reinigen“ anzeigen. Bitte klicken Sie nach jeder Behandlung auf diese Schaltfläche, den Griff reinigen

2 Es werden 4 Betriebsmodi angegeben, bei denen Intensität und Frequenz unterschiedlich sind.
S0 Dauerbetriebsmodus

3 Geben Sie die Energieintensität an.

4 Arbeitszeit angeben. Sie ist von 0 bis 30 Minuten einstellbar.

Normalerweise ist keine Justierung nötig; wenn wir diesen Hebel betätigen, startet der Countdown.

5 Maximale Flüssigkeitsmenge in der Flasche: 10 ml.

Flüssigkeit einfüllen: Nach dem Starten des Hebels drücken Sie bitte diese Taste, um die Flüssigkeit aus der Flasche

zum Hebel zu befördern. 6 Einstellungstaste. Hier können Sie die Sprache

ändern. 7 Start-/Stopp-

Taste 8 Reset-Taste

9 Andere Griffe auswählen



5.8 Verwendung des Sauerstoffstrahls

- 5.8.1 Beginnen Sie, nachdem Sie die Parameter Arbeitszeit und Dosierung angepasst haben, und Modus;
- 5.8.2 Platzieren Sie die Sonde in der Nähe des aktiven Teils, klicken Sie auf das Symbol auf dem Bildschirm und drücken Sie anschließend die Starttaste am Griff, um den Startvorgang zu starten, die Funktion;
- 5.8.3 Folgen Sie langsam den Konturen der betroffenen Stelle und heben Sie das Gerät 5 bis 8 Minuten lang in kreisenden Bewegungen an;

5.8.4 Wie man den Griff benutzt;



Kreisbewegung auf der Fläche




Vorbereitung des EMS-Handlings:

1. Setzen Sie den Behandlungskopf auf den Griff. Im Kopf befindet sich bereits ein Kristallit, daher ist keine weitere Installation erforderlich.

Kristallit.

Im Set ist eine kleine Rolle enthalten, die am Behandlungskopf angebracht werden kann. Dies erleichtert die Handhabung für Einsteiger; manche professionelle Anwender benötigen die Rolle nicht. Die Rolle ermöglicht eine reibungslosere Bewegung des Griffs.

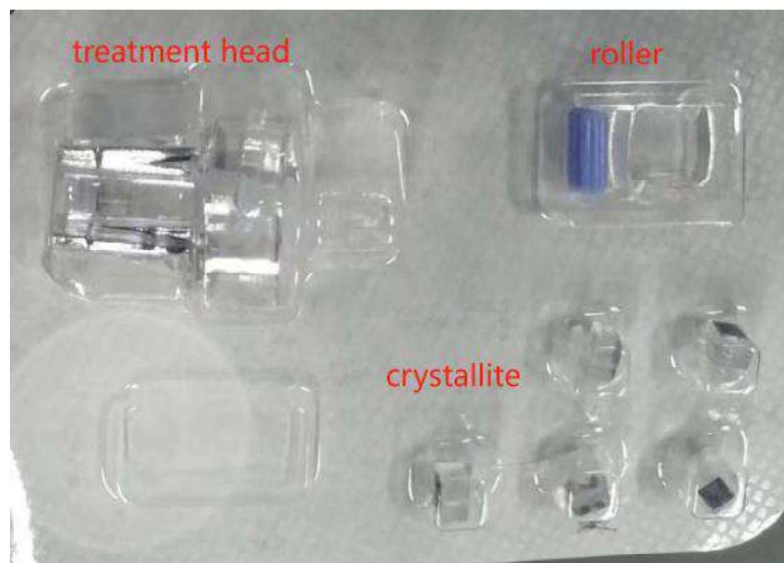




Vorbereitung des EMS-Handlings:

2. Verwenden Sie die ID-Karte (den runden Aufkleber), um auf die Bedienoberfläche zuzugreifen.

Jeder Aufkleber enthält 7 Stück. Wir müssen diesen Aufkleber oben auf die Maschine kleben, dann können wir auf die Bedienoberfläche zugreifen.

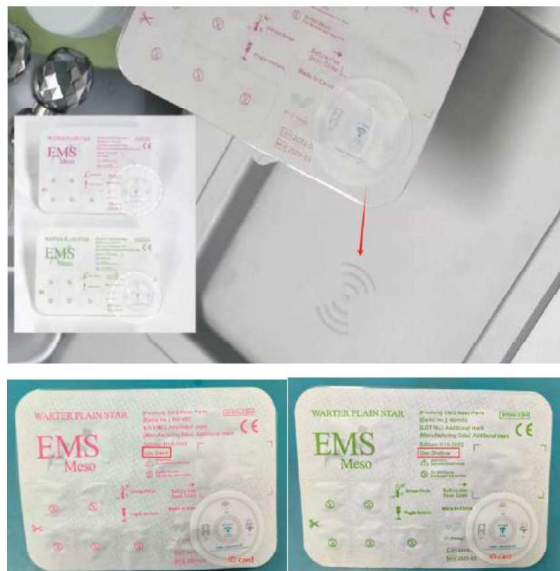


Eine Variante ist oberflächlich, die andere tief. Oberflächliche Varianten eignen sich für empfindliche oder dünne Haut. Tiefe Varianten können für normale oder dicke Haut verwendet werden.



5.9 Anwendung von EMS-Gesichtsbehandlung

Vorbereitung des EMS-Handlings:

3. Füllen Sie physiologische Kochsalzlösung in die Flasche und drücken Sie anschließend die Reinigungstaste auf dem Bildschirm, um Schlauch und Griff zu reinigen. Das Wasser tritt aus dem Behandlungskopf aus. Stellen Sie einen Becher oder eine Schale unter den Griff, um die Tropfen aufzufangen. Die Reinigung des Schlauchs dauert 3–5 Minuten.

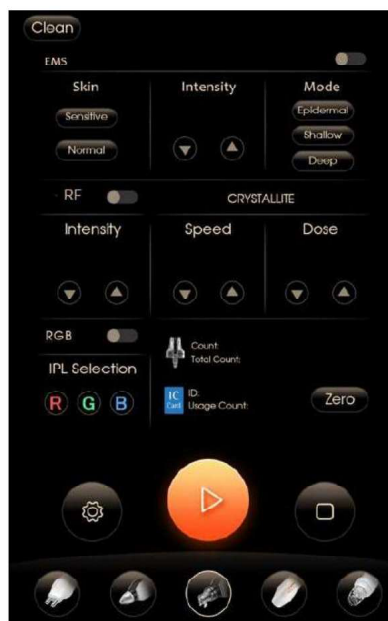


4. Füllen Sie anschließend das Produkt oder die Essenz in die Flasche.



Bedienschnittstelle

Reibungslos

Die Elektrostimulation unterstützt das tiefe Eindringen des Serums in die Haut und bewirkt sanfte Muskelkontraktionen. Kunden können dabei einen leichten Mikrostrom spüren. Behandlung.

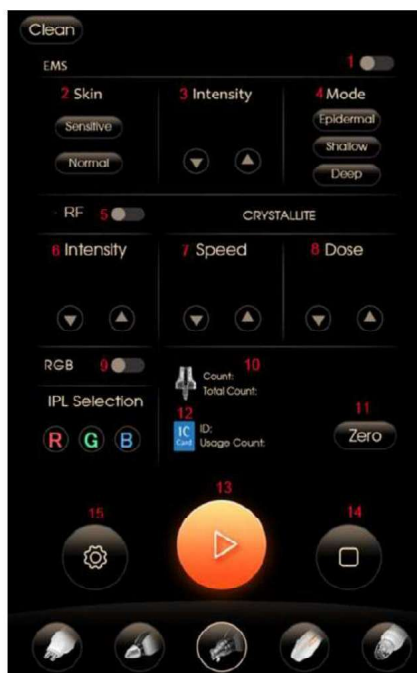

1. EMS-Funktion öffnen

2. Wählen Sie den Hauttyp: empfindlich oder normal, je nach Situation des Kunden.

3. Intensität: die Energie des EMS

Bei empfindlicher Haut empfehlen wir, mit Stufe 2 zu beginnen und die Intensität dann je nach Bedarf anzupassen. Kundenfeedback.


Bei normaler Haut empfehlen wir, mit Stufe 4 zu beginnen und die Temperatur dann entsprechend anzupassen. Kundenfeedback.

Modus: Epidermal, Flach, Tief. Wir wählen den Modus je nach den Injektionsprodukten oder der Essenz, die wir verwenden werden.



RF

Die von den die Nanokassette umgebenden Elektroden ausgesendete bipolare Radiowelle stimuliert die Kollagenproduktion, erweitert die Blutgefäße und erhöht so die Aufnahme des Kosmetikprodukts während der Behandlung.

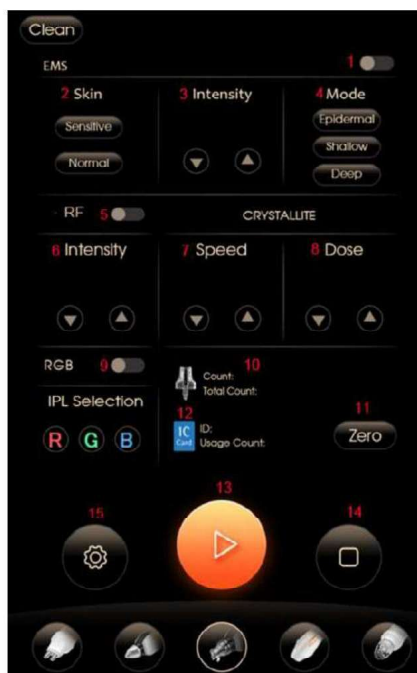

5. RF-Funktion öffnen

6. Intensität: Aufgrund der HF-Energie kann es während der Behandlung zu einem leichten Wärmegefühl kommen. kann die Energie entsprechend dem Kundenfeedback anpassen
Wir stellen die HF-Energie auf Stufe 5 ein, und wir können
Die Energie wird entsprechend dem Kundenfeedback angepasst.

Für jüngere Kunden können wir die HF-Energie reduzieren.


Für ältere Kunden können wir eine höhere Energiedichte ausprobieren.

Während der Behandlung kann es vorkommen, dass Kunden ein leichtes Wärmegefühl verspüren.



Kristallit

Es nutzt einen Mikroprozessor mit vielen Nano-Nadeln, die mit hohem Druck in die Haut eindringen. Dadurch regeneriert das Gerät die Haut, reduziert Falten und Verfärbungen und führt ein Facelifting durch.

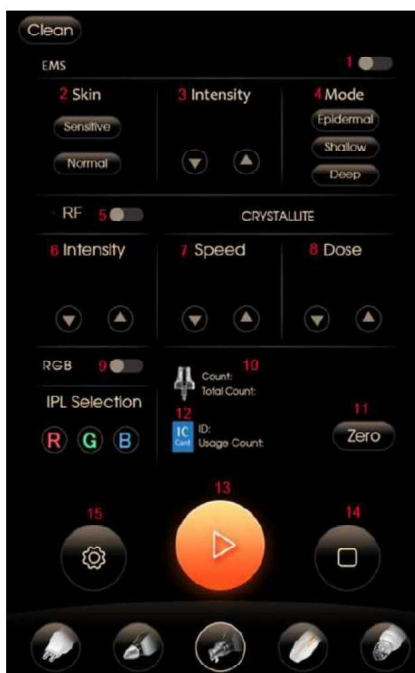

7. Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit des Kristallits. Wir empfehlen, ab Stufe 9 zu testen. Neue Benutzer können...

Verringern Sie die Geschwindigkeit.

8. Dosierung: Die Dosierung des Produkts oder der Essenz. Bei dünnflüssigen Produkten kann man mit Stufe 3 beginnen; bei dickflüssigen Produkten
Bei Flüssigkeiten können wir es ab Stufe 8 versuchen. Nachdem wir die Dosis ausgewählt haben, können wir den Griff starten, um zu überprüfen, ob die
Tritt das Produkt aus dem Kristallit aus? Wenn ja, ist die Dosis in Ordnung; wenn nicht, können wir sie erhöhen.

beachten.

Außerdem können wir Geschwindigkeit und Dosis über die Tasten am Griff einstellen.


Taste D ist die Dosis.

Taste S steht für Geschwindigkeit.

Wir können die Flüssigkeitsgeschwindigkeit und das Flüssigkeitsvolumen je nach Geschwindigkeit und Dosis steuern.



5.9 Anwendung von EMS-Gesichtsbehandlung

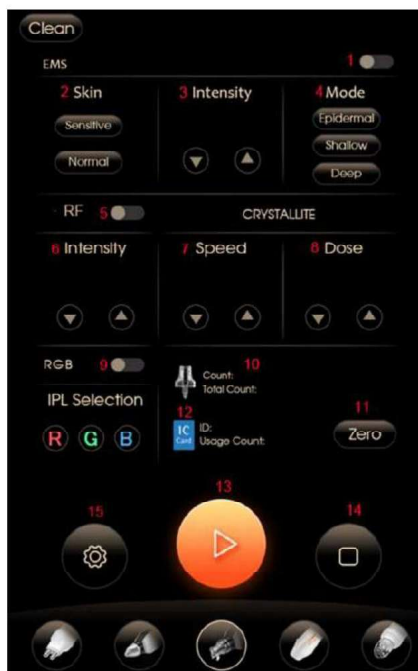

9. RGB

Die Kontrollleuchte am Behandlungskopf verfügt über drei Farben: Rot, Grün und Blau. Der Anwender kann die Lichtfarbe auswählen.

Rote Farbe: zur Hautaufhellung; Grüne

Farbe: zur Hautberuhigung; Blaue Farbe: für

zu Akne neigende Haut

10. Die Anzahl und die Gesamtzahl ergeben sich aus der Anzahl der Kristallit-Pop-ups.

11. Die Zählerstände können durch Klicken auf die Schaltfläche „Löschen“ auf Null zurückgesetzt werden.

12. Zeigen Sie die Informationen des Personalausweises an.

13. Start/Stop-Taste

14. Schaltfläche „Wiederherstellen“

15. Einstellungsschaltfläche: Hier können wir eine andere Sprache einstellen.



5.9 Anwendung von EMS-Gesichtsbehandlung

Behandlungsschritte: 1.

Gesicht reinigen und mit einem lauwarmen Tuch abwischen.


2. Dann beginnen Sie mit der Behandlung.

3. Achten Sie bei der Verwendung des Handstücks darauf, dass der Behandlungskopf senkrecht zum Gesicht steht und bewegen Sie ihn gleichmäßig über die Haut.

4. Die folgenden Bilder zeigen die von uns empfohlenen Behandlungstechniken. Eine Gesichtsbehandlung dauert in der Regel etwa 20 Minuten.

5. Nach der Behandlung empfehlen wir die Anwendung von Hyaluronsäure oder einer regenerierenden Gesichtsmaske.



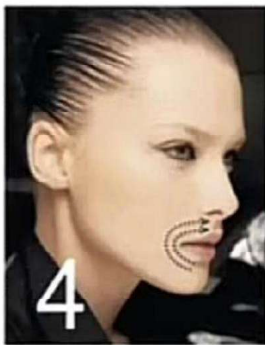



Wartung:

Bitte beachten Sie: Vor der Behandlung empfehlen wir, das Rohr und die Kristallite mit physiologischer Kochsalzlösung zu reinigen. Nach der Behandlung empfehlen wir, das Rohr mit physiologischer Kochsalzlösung, gereinigtem Wasser oder warmem Wasser (ca. 40 °C) zu spülen.

Die Reinigung ist sehr wichtig, da die Rohre sonst verstopfen könnten.



Verwendung des Hautanalysators

Wenn wir auf dem Bildschirm auf die Start-Schaltfläche von ANALYZER klicken, gelangen wir zu Abbildung 2.

Es zeigt 4 Teile:

- Mitglied
- Erkennung
- Produkte
- Bildvergleich

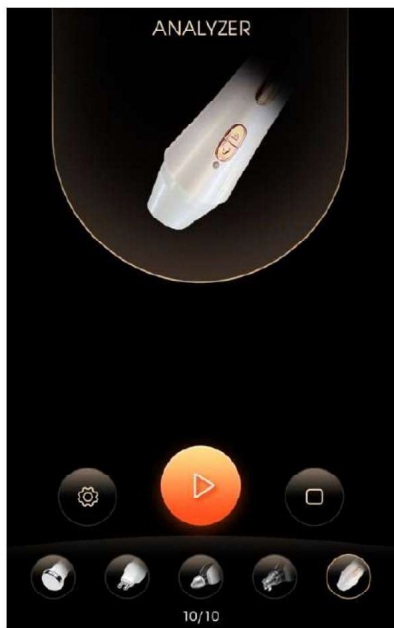


Abbildung 1

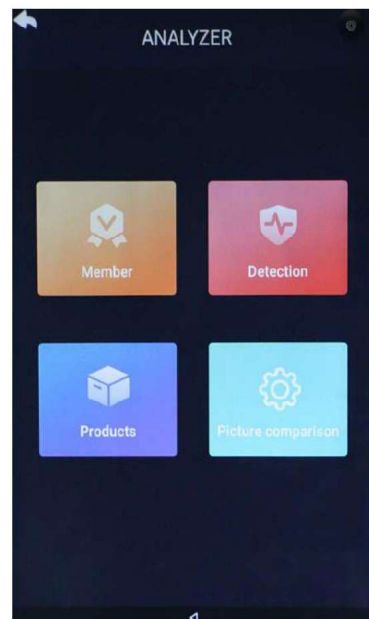


Abbildung 2



Verwendung des Hautanalysators

• Mitglied

Wenn wir auf die Schaltfläche „Mitglied“ klicken, gelangen wir zu Abbildung 4. Dort können wir alle Kundeninformationen einsehen und die Kundenzahl erhöhen. Klicken + , Wir gehen nun zu Abbildung 5 über. Auf dieser Seite können wir die Kundeninformationen erweitern.

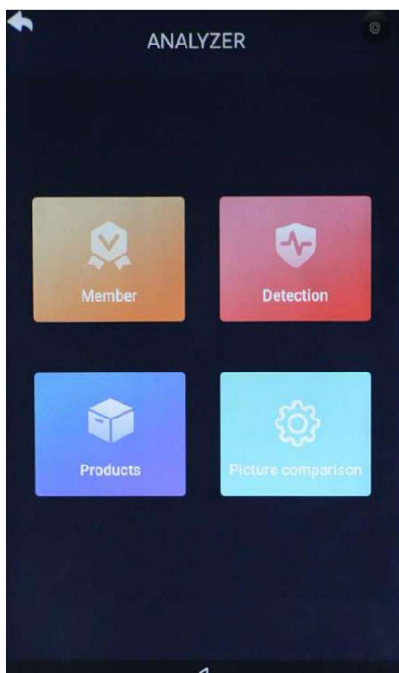


Abbildung 3



Abbildung 4

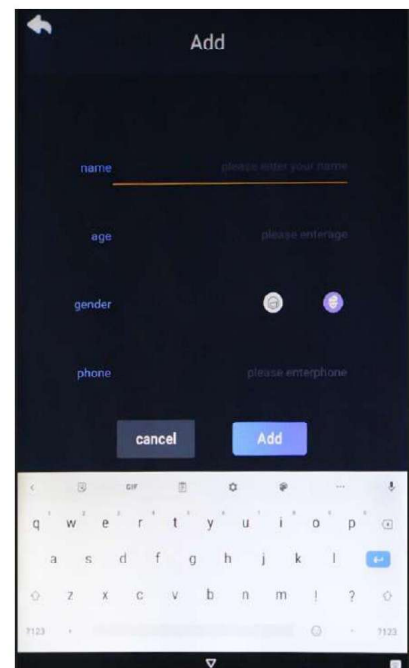


Abbildung 5



Verwendung des Hautanalysators

• Mitglied

Wenn wir auf den Namen des Kunden klicken, gelangen wir zu Abbildung 7. Dort werden die detaillierten Informationen angezeigt, die wir bearbeiten können. Auf dieser Seite sehen wir einen Ordner mit Informationen zu diesem Kunden.

Nachdem die Kundendaten bestätigt wurden, empfehlen wir, auf die Schaltfläche „Erkennen“ zu klicken, um von hier aus zur Erkennungsseite (Abbildung 8) zu gelangen. Dadurch werden alle Analyseinformationen im Kundenordner gespeichert, sodass wir sie leicht einsehen können.

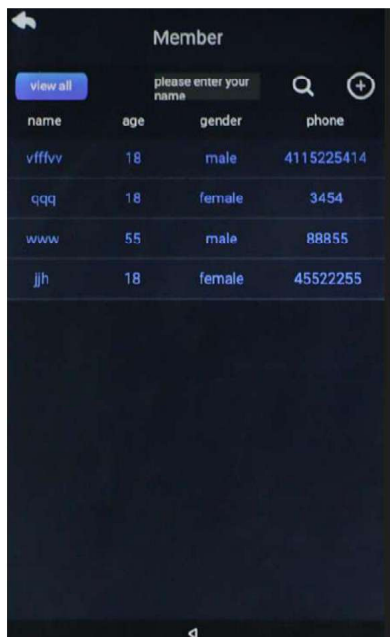


Abbildung 6

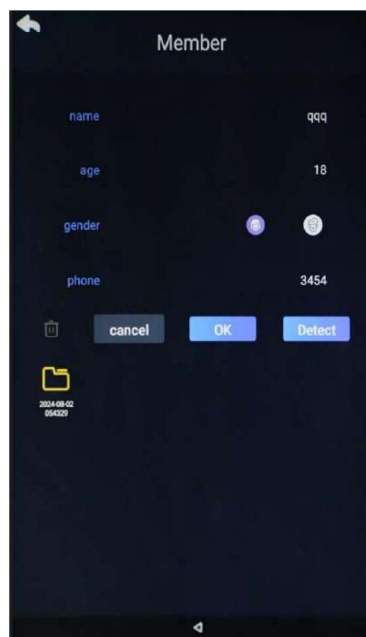


Abbildung 7

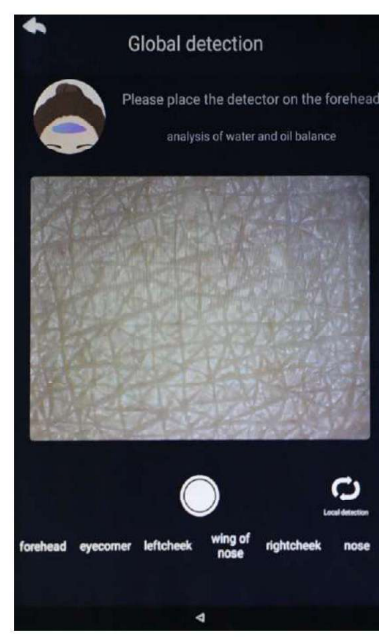


Abbildung 8



Verwendung des Hautanalysators

• Produkte

Wenn wir auf die Schaltfläche „Produkt“ klicken, gelangen wir zu Abbildung 10. Auf dieser Seite können Benutzer die Produktinformationen bearbeiten: Produktname, Kategorie, Preis und Funktion. Verwandte Produkte werden in den abschließenden Analyseberichten angezeigt. Durch Klicken auf „+“ gelangen wir zu Abbildung 11. Auf dieser Seite können wir alle Informationen bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass wir bei der Option „Klassifizierung“ folgende Optionen auswählen können: Aufhellung, Ölregulierung, Faltenreduzierung, Anti-Empfindlichkeit, Sommersprossen, Mitesser.

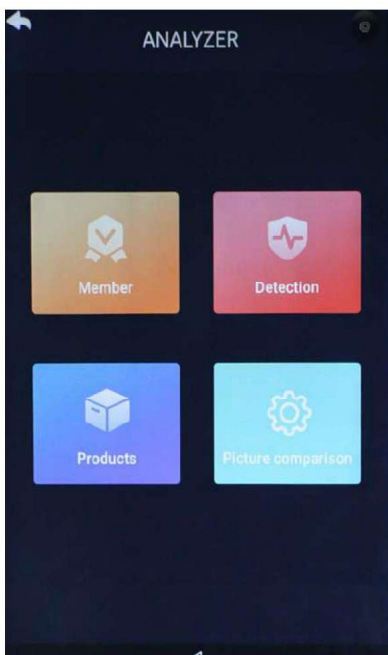


Abbildung 9



Abbildung 10

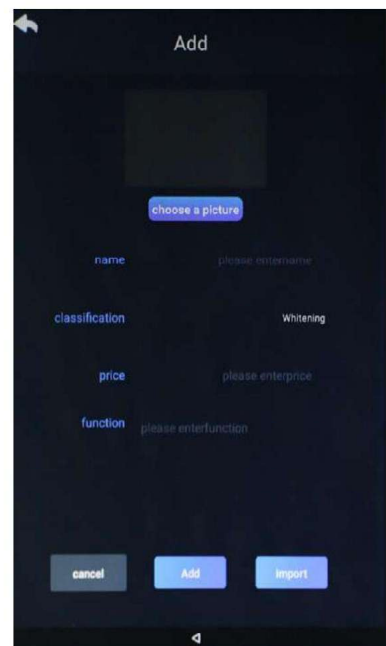


Abbildung 11



Verwendung des Hautanalysators

• Erkennung

Wir können auf den roten Knopf in Abbildung 12 klicken und gelangen so direkt zur Erkennungsseite (Abbildung 14); alternativ können wir auf die Schaltfläche „Erkennen“ in den Kundeninformationen klicken.

Seite Abbildung 13, um zur Erkennungsseite Abbildung 14 zu gelangen. Wir empfehlen die zweite Methode, damit die Analyseberichte im Kundenordner gespeichert werden.

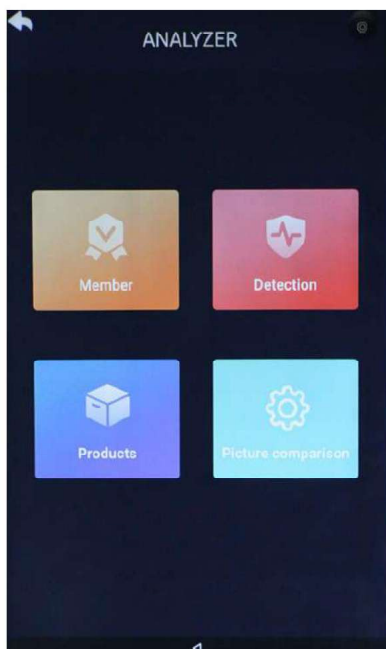


Abbildung 12

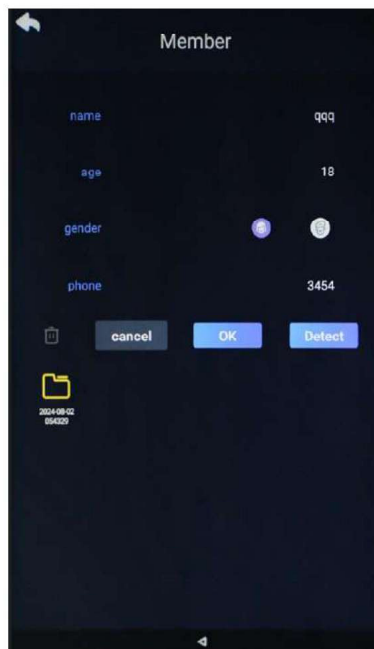


Abbildung 13

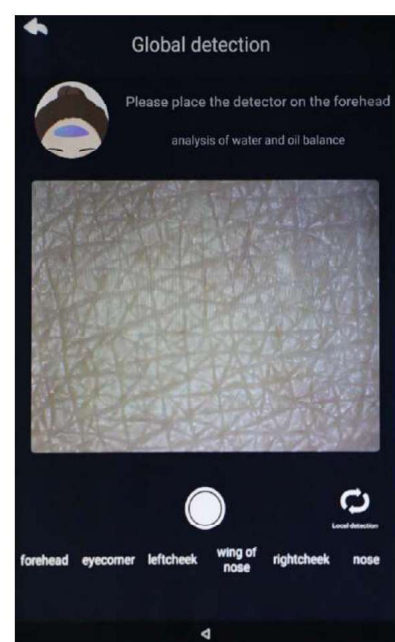


Abbildung 14




Verwendung des Hautanalysators

• Erkennung

Nachdem Sie die Erkennungsseite aufgerufen haben, vergewissern Sie sich bitte, dass der Griffknopf eingeschaltet ist und die WLAN-Verbindung einwandfrei funktioniert.

Wir folgen dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Fotos zu machen. Es gibt 6 Bereiche: Stirn, Augenwinkel, linke Wange, Nasenflügel, rechte Wange, Nase.

Für eine genaue Analyse befolgen Sie bitte die Anleitung, positionieren Sie die Kamera an der richtigen Stelle und machen Sie ein klares Foto.

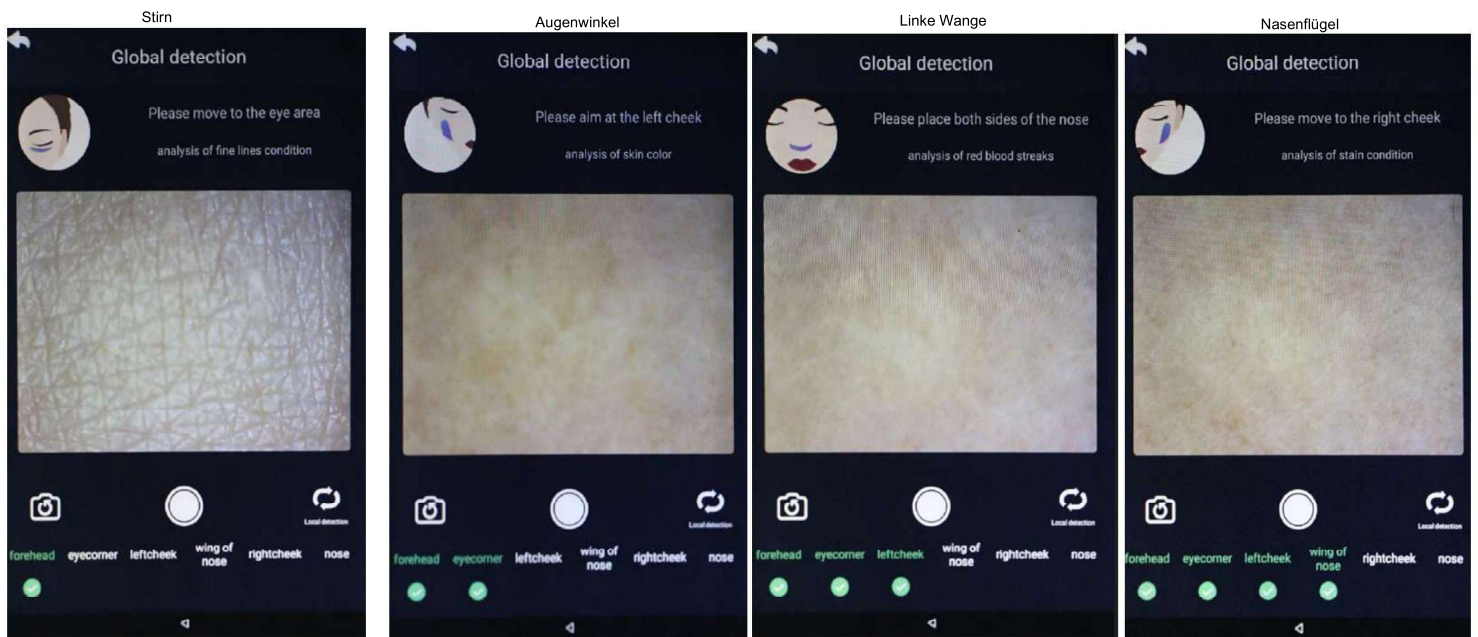



Verwendung des Hautanalysators

• Erkennung

Wenn wir sechs Fotos aufgenommen haben, beginnt die Maschine mit der Analyse. Anschließend gelangen wir zur Seite mit dem Analysebericht (Abbildung 15).



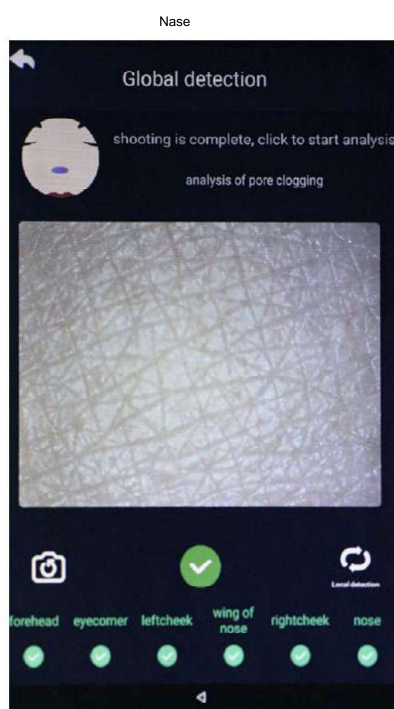



Abbildung 15

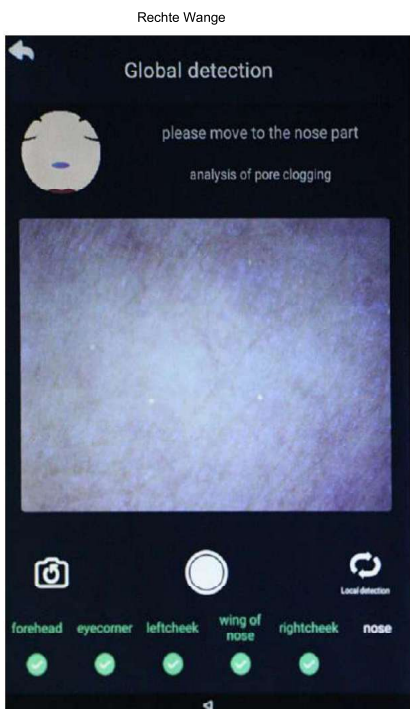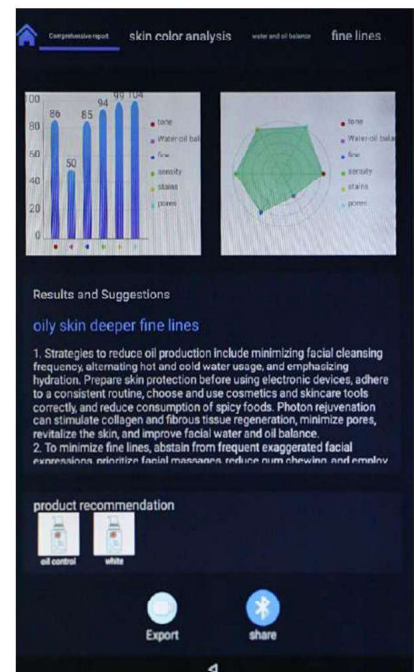

Verwendung des Hautanalysators

- Analysebericht

Sobald wir sechs Fotos aufgenommen haben, beginnt die Maschine mit der Analyse. Anschließend gelangen wir zur Berichtsseite (Abbildung 16). Diese enthält 6 Seiten: Gesamtbericht, Hautfarbenanalyse, Wasser- und Ölhaushalt, Fältchenanalyse, Empfindlichkeitsanalyse, Fleckenanalyse, Porenanalyse. Auf jeder Seite werden Analyseergebnisse und Empfehlungen bereitgestellt sowie verwandte Produkte vorgeschlagen, die wir bereits im System bearbeitet haben.

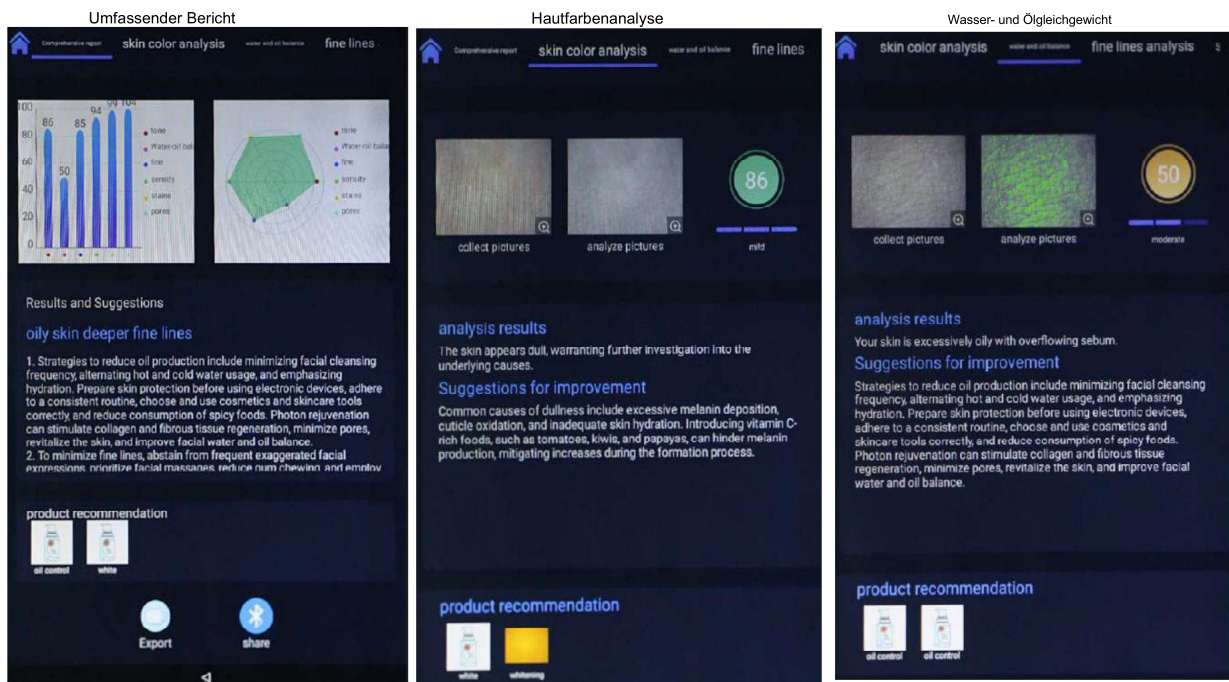




Verwendung des Hautanalysators


Feinlinienanalyse




Sensitivitätsanalyse

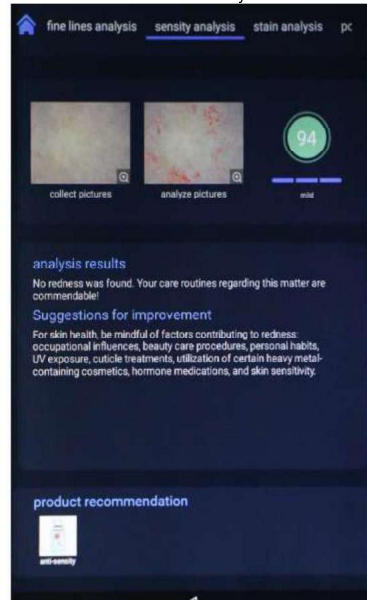

Färbeanalyse

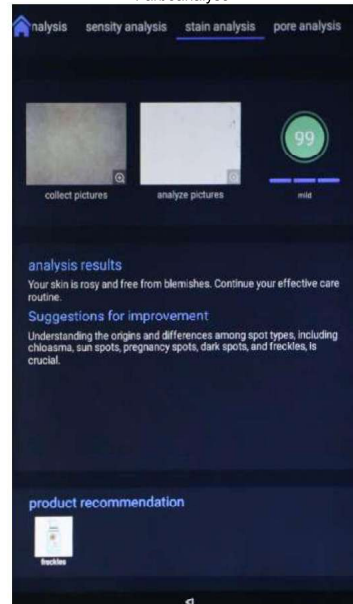

Porenanalyse

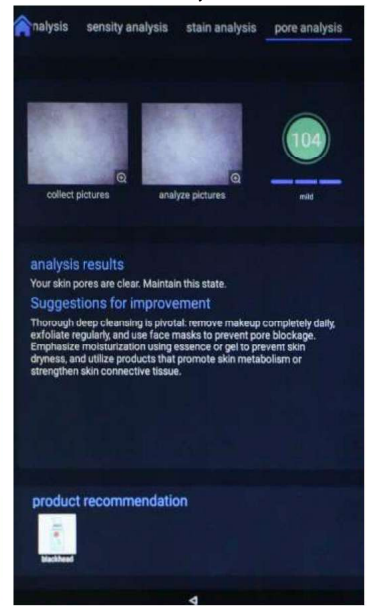




Verwendung des Hautanalysators

Klicken Sie auf „Bildvergleich“, dann gelangen Sie zu Abbildung 16. Auf dieser Seite können Sie Vorher- und Nachher-Fotos vergleichen.

Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um ein Foto vor der Behandlung auszuwählen. Positionieren Sie anschließend die Kamera auf der entsprechenden Stelle, um ein Foto nach der Behandlung aufzunehmen.

Es werden 4 verschiedene Lichtquellen verwendet: Wählen Sie ein Bild, UV-Licht, Dermis, Epidermis.

Abbildung 16

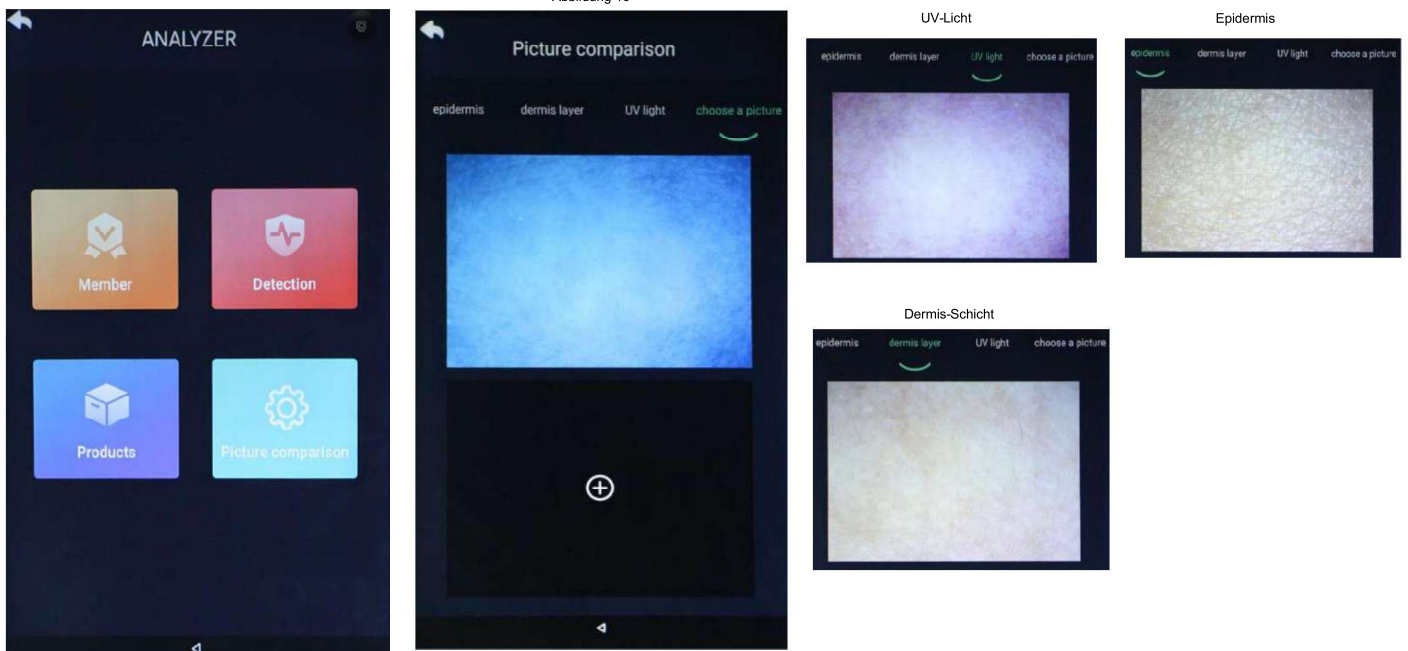



Beachten:

6.1 Verzichten Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung auf reizende Hautpflegeprodukte oder Kosmetika und achten Sie auf ausreichenden Sonnenschutz.

6.3 **6.2** Tragen Sie eine Woche lang eine reine Feuchtigkeitsmaske auf.

Bei dünner Nagelhaut oder stark geröteten Wangenknochen ist von der Dermabrasion abzuraten. **6.4** Bei dünner Hornschicht oder starker Rötung der Wangenknochen sollte die Radiofrequenztherapie entlang der Wangenknochen durchgeführt werden, wobei die Behandlungsdauer nicht zu lang sein sollte. **6.5** Personen mit schweren Allergien oder schwerer Akne können nicht behandelt werden.



Warnung:

Wenn sich der Patient unwohl fühlt, kann der Handregler betätigt werden, um die Geräteausgabe zu stoppen und so die Patientensicherheit zu gewährleisten.



Kapitel 7 Wartung und Reparatur

7.1 Wartung

7.1.1 Tägliche Inspektion Die

Vorgesetzten müssen Instrumente und Komponenten überprüfen. a)

Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Falls nicht, tauschen Sie die Steckdose bitte aus. b)

Ist das Netzkabel verformt, beschädigt oder getrennt? Prüfen Sie mit bloßem Auge, ob das Kabel beschädigt oder verformt ist. In diesem Fall kann es durch Kriechströme zu einem Brand kommen. Bitte tauschen Sie das Netzkabel umgehend gegen ein neues aus. c)

Ob der Bedienhebel defekt oder nicht angeschlossen ist: Prüfen Sie mit bloßem Auge, ob die Ausgangsleitung beschädigt oder verformt ist. Falls ja, tauschen Sie sie bitte umgehend aus. d)

Bitte überprüfen Sie vor der Benutzung, ob die angezeigten Informationen des Geräts korrekt sind. Sollten sie nicht korrekt sein, stellen Sie die Benutzung bitte ein.

7.1.2 Reinigung

Beim Reinigen des Instruments muss Staub mit einem trockenen, weichen Tuch abgewischt werden, und gestohlene Gegenstände müssen mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden. Vor der Reinigung des Instruments muss unbedingt der Netzschalter ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen werden.

7.1.3 Austausch der Sicherung a) Die

Leistungssicherung hat die Spezifikation 8A (γ5 ×20 mm). b) Gehen Sie beim

Austausch der Sicherung wie folgt vor: c) Schalten Sie den Netzschalter aus; d)

Ziehen Sie den Netzstecker; e) Hebeln

Sie das Sicherungsgehäuse mit

einem Schraubendreher auf; f) Entnehmen Sie die defekte Sicherung und

ersetzen Sie sie durch eine neue; g) Setzen Sie das Sicherungsgehäuse

wieder in seine ursprüngliche Position ein; h) Stecken Sie den

Netzstecker wieder ein.



Kapitel 7 Wartung und Reparatur



Warnung:

Beim Auswechseln der Sicherung schalten Sie bitte die Stromzufuhr ab und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

7.1.4 Langfristig (mehr als ein Jahr): Wenn während des Gebrauchs Staub im Inneren des Instruments entfernt werden muss, sollte dies von professionellem Wartungspersonal durchgeführt werden.

7.1.5 Wenn das Instrument nicht benutzt wird, sollte es an einem gut belüfteten und trockenen Ort aufbewahrt und mit einer Staubschutzhülle abgedeckt werden.

7.2 Reparatur

7.2.1 Nach dem Kauf des Instruments müssen Sie die Garantiekarte ausfüllen und an den Hersteller oder dessen Vertreter senden, damit die Garantie gültig ist; ab Kaufdatum des Instruments wird das Instrument bei einem Qualitätsproblem, das vom Unternehmen verursacht wurde, ein Jahr lang kostenlos garantiert (Hinweis: Die Garantie gilt mit Kaufbeleg und Garantiekarte; der Garantiumfang beschränkt sich hier auf das Hauptinstrument und umfasst keine Zubehörteile und andere Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig ersetzt werden müssen).

7.2.2 Nach Ablauf der Garantiezeit wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller, um Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen.

Zur Reparatur dieses Geräts wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen Händler. Führen Sie keine Reparaturen oder Auspackversuche selbst durch. **7.2.3** Unser Unternehmen übernimmt in diesem Fall keine Garantie.



Kapitel 8 Häufige Fehler und deren Behebungsmethoden

- 8.1** Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, zerlegen oder montieren Sie es nicht eigenmächtig. Wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst oder Ihren Händler.
yFinde die Ursache des Fehlers heraus.
- 8.2** Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, prüfen Sie anhand des unten aufgeführten Instruments, ob Sie das Problem selbst beheben können.

Fehler	Ursachen	Lösungen
Das Gerät reagiert nach dem Einschalten nicht.	Der Netzstecker ist nicht in die Steckdose gesteckt; Der Netzschalter ist ausgeschaltet; Die Sicherung ist durchgebrannt.	Prüfen Sie, ob Stecker und Steckdosen ordnungsgemäß eingesteckt sind.
Ein Griff kann nicht normal benutzt werden.	Der Startknopf des Griffs wird nicht gedrückt. Die Sonde ist nicht korrekt installiert. Der Arbeitskopf ist beschädigt. Die Schnittstelle auf der Rückseite des Instruments	Drücken Sie den Startknopf am Griff. Prüfen Sie, ob die Sonde korrekt installiert ist. Ersetzen Sie den Arbeitskopf oder den Silikonring. Installieren Sie die Maschine neu.
Auslaufende Flüssigkeit	Der Silikonring an der Dichtungsstelle ist beschädigt oder fehlt. Unsachgemäße Installation.	Ersetzen Sie den Silikonring zur Abdichtung. Zur Reparatur an den Hersteller zurücksenden.



Kapitel 9 Verantwortlichkeiten des Herstellers

- 9.1** Die hergestellten Produkte müssen den Produktstandards entsprechen. Bei Abweichungen übernimmt unser Unternehmen die Verantwortung für Ersatzlieferung und Rückgabe.
- 9.2** Unser Unternehmen übernimmt die entsprechende Verantwortung für Personen- und Sachschäden, die durch Herstellungsfehler des Produkts verursacht werden. Unser Unternehmen haftet jedoch nicht für folgende Situationen:
- a) Käufer und Bediener, die nicht gemäß den Anweisungen handeln und die Sicherheitsvorkehrungen nicht beachten,
Warnhinweise;
 - b) Verstöße gegen Vorschriften bezüglich Transport, Installation, Verwendung, Wartung, Lagerung und sonstige Vorschriften, die zu Sach-, Personen- oder Eigentumsschäden führen.
- 9.3** Unser Unternehmen bietet lebenslange Wartungs- und technische Serviceleistungen für die Produkte an und repariert diese für den Benutzer kostenlos bei Herstellungsfehlern, die innerhalb des festgelegten Qualitätssicherungszeitraums auftreten.



Kapitel 10 Austausch von Zubehör



Zubehörteile müssen bei unserem Unternehmen erworben werden, wenn sie ersetzt werden müssen.



11.1 Lagerung:

Das Gerät sollte in der Originalverpackung in einem gut belüfteten Reinraum gelagert werden. Die Verpackung sollte erhöht stehen. Die Umgebungstemperatur sollte zwischen -10 °C und 40 °C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit maximal 93 % betragen. Schädliche, entzündliche, explosive und korrosive Gase sind nicht zulässig.

11.2 Transport: Das

Instrument ist in der Verpackung für den Transport auf der Straße, Schiene, in der Luft und auf dem Wasserweg geeignet. Es ist vor starken Vibrationen und Stößen beim Be- und Entladen sowie während des Transports zu schützen und darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Der Kontakt mit brennbaren und ätzenden Stoffen ist zu vermeiden. Die genauen Anforderungen werden im Auftrag festgelegt.